

マグシステム

MAG SYSTEM

MD-1500

インストールガイド Windows® 8 編


はじめに


この度は、マグウォッチャー、マグウォッチャー・プラス用アプリケーションソフトウェア/マグシステム（MD-1500）をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品をご使用頂くためにご使用前にこのインストールガイドをよくお読みください。本インストールガイドは、アプリガイドを適宜参照しながらお読みください。インストールガイドは大切に保管して必要に応じてご覧ください。このインストールガイドの記載事項及び製品の仕様は、予告なしに変更する場合があります。



株式会社ディード

1. 安全にお使いいただくために

本書には人への危害、財産の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

＜警告表示の意味＞	
	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

＜お守りいただく内容の種類＞	
	禁止 この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

	
	警告 重要なコンピュータシステムおよび画像診断用のパソコンにマグシステムをインストールしない。 ●誤動作の恐れがあります。

2. 動作環境条件（※1）

- ・パソコン：IBM®PC互換機。下記OSが動作できる仕様のもの。
- ・OS：Windows®8日本語版
- ・ハードディスクの空き容量：40Mbyte以上
- ・USBポート：USB2.0以上のポートを1ポート以上備えること
- ・ポインティングデバイス：マウスなどを備えること
- ・ディスプレイ：800×600ドット以上
- ・光学ドライブ：CD-ROMの読み込みができるもの（※2）
- ・インターネット接続環境：プログラムのダウンロードができるもの（※3）

- （※1）この動作環境条件を満たす全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。必要とされる動作環境条件は、システムによって異なる場合があります。
- （※2）CD-ROMからインストールする場合に必要。
- （※3）ダウンロード版からインストールする場合に必要。ドライバのインストールに時間がかかる場合があります。

3. インストールの準備

- CD-ROMの場合
CD-ROMを光学ドライブにセットしてください。
- ダウンロード版の場合
 - ①ファイルのダウンロード
デスクトップ等の適切なディスクドライブ上に、弊社ホームページ（http://www.deed-jp.com/）の「マグウォッチャー」のページから「mag****.zip」をダウンロードしてください。なお「****」の文字は変わることがあります。
 - ②ファイルの解凍
ダウンロード完了後、「mag****.zip」をダブルクリックしてください。ファイルが解凍され、「mag****」というフォルダが作成されます。

4. インストール方法

本ソフトウェアを使用できるようにパソコンに各ソフトウェアを（A）～（C）の手順でインストールします。インストール方法及び画面表示については、パソコンの設定によって多少の違いがあります。インストールを行う際は、プログラムの追加を行う権限を持つアカウントでログインし、他のアプリケーションソフトを全て停止してください。

- （A）通信ドライバのインストール
マグウォッチャー、マグウォッチャー・プラス（以下、マグウォッチャー等）とパソコンの通信を行なう基本的なソフトウェアをインストールします。
- （B）マグウォッチャー等の使用準備
使用する全てのマグウォッチャー等をパソコンに認識・登録させ、使用する準備を行ないます。
- （C）マグシステム本体のインストール
マグウォッチャー等を設定するためのソフトウェア本体をインストールします。

- 注意1：通信ドライバのアンインストールはできません。本ソフトウェアの再インストールを行う場合（A）・（B）の作業は省略してください。
- 注意2：マグウォッチャー等を追加導入する場合は、（B）の操作を行ってください。この場合、CD-ROMは不要です。
- 注意3：パソコンにインストールされているウイルス対策ソフトウェアによっては、本ソフトウェアのインストールの確認を行ったリインストールを阻止するものがあります。一時的に機能を停止するか、許可してください。
- 注意4：以前のバージョンのマグシステムがインストールされている場合は、アンインストールしてから作業を行ってください。アンインストール方法は、「8. MagSystemのアンインストール」に従ってください。

5. （A）通信ドライバのインストール

- 1 デバイスドライバソフトウェアのインストール（共通）

- ① 1台のマグウォッチャー等とパソコンを付属のUSBケーブルを使って接続し、5秒以上お待ちください。充電動作を行います。
⇒赤色ランプが点滅または、青色ランプが点灯します。
- ② マグウォッチャー等の電源スイッチを押し（2秒以下）、電源をONにします。
⇒青色ランプが点滅します。

- ➡ インターネットに接続されている場合（オンライン）
自動でインストールが開始されます。タスクトレイに下記アイコンが表示され、しばらくしてから消えれば、インストールが完了します。この時、マグウォッチャー等に特定の機器番号が与えられます。
- 注記：インターネットの通信回線的环境によっては、ドライバのインストールに時間がかかる場合があります。



以上で通信ドライバのインストールは、完了しました。

※上記アイコンが表示されない場合は、下記「インターネットに接続されていない場合（オフライン）」の手順で、インストールを行ってください。


- ➡ インターネットに接続されていない場合（オフライン）
- 2 以降の手順でインストールを行ってください。

- 2 デバイスドライバソフトウェアのインストール（オフライン）


- ① CD-ROMを光学ドライブにセットします。
- ② 「デスクトップ」画面にてカーソルを右下へ移動し、その中から「設定」をクリックします。表示されたメニューの中から「コントロールパネル」をクリックします。




- ③ 「コントロールパネル」の中から「システムとセキュリティ」をクリックします。

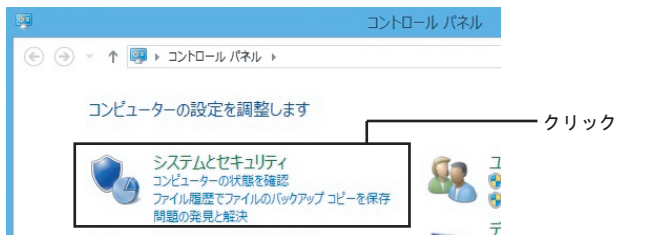


- ④ 「システムとセキュリティ」の画面が表示されますので、「デバイスマネージャー」をクリックします。

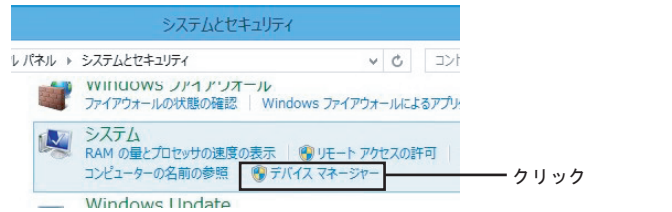

- ⑤ 「デバイスマネージャー」の画面が表示されますので、「FT232R USB UART」をダブルクリックします。

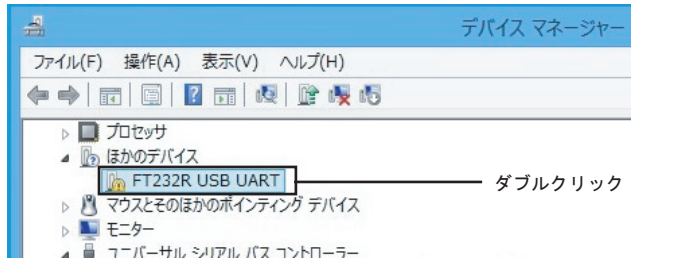


- ⑥ 「FT232R USB UART」の画面が表示されますので、「ドライバの更新」をクリックします。

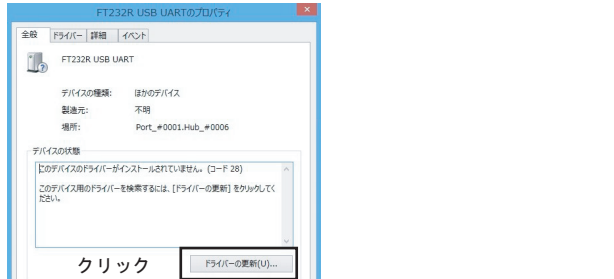

- ⑦ 次の画面で、「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



- ⑧ 次の画面で「参照」、「DVD RW ドライブ MagSystem」、「OK」の順にクリックします。

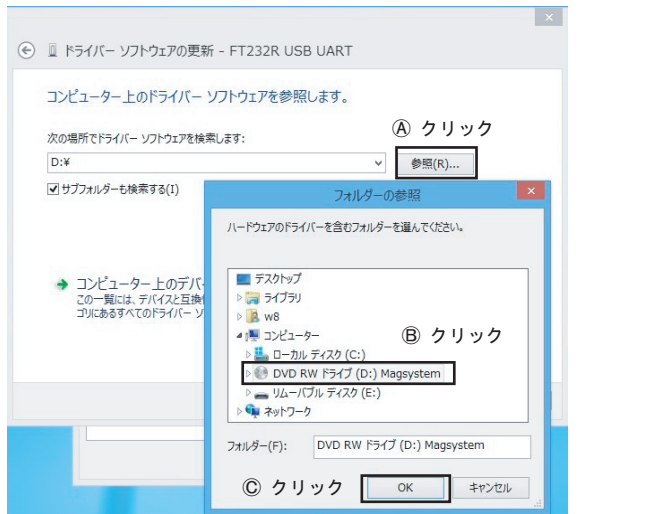


- ⑨ 次の画面で「次へ」をクリックします。インストールを開始します。




- ⑩ インストールが始まりしばらくすると、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」の画面が表示されます。「デバイスマネージャー」以外の画面を全て閉じてください。

- ⑪ 「デバイスマネージャー」画面の「USB Serial Port」をダブルクリックします。

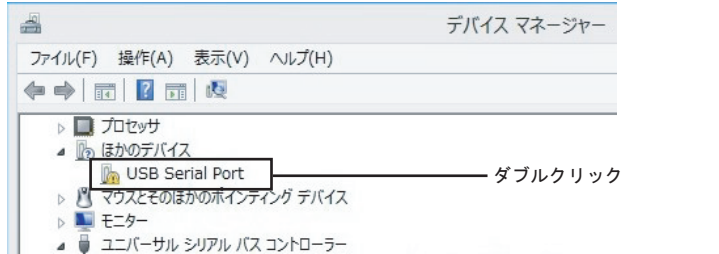


- ⑫ 「USB Serial Port」画面が表示されますので、「ドライバの更新」をクリックします。

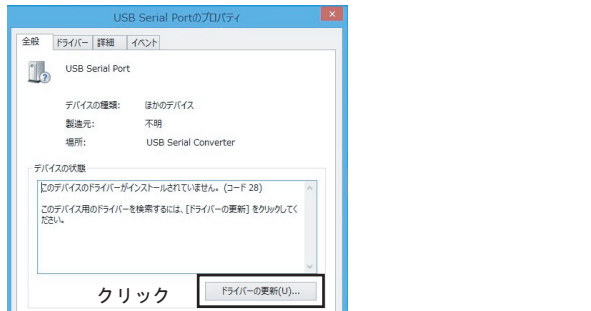

- ⑬ 次の画面で、「コンピューターを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



- ⑭ 次の画面で「**Ⓐ 参照**」、「**Ⓑ DVD RW Magsystem**」、「**Ⓒ OK**」の順にクリックします。

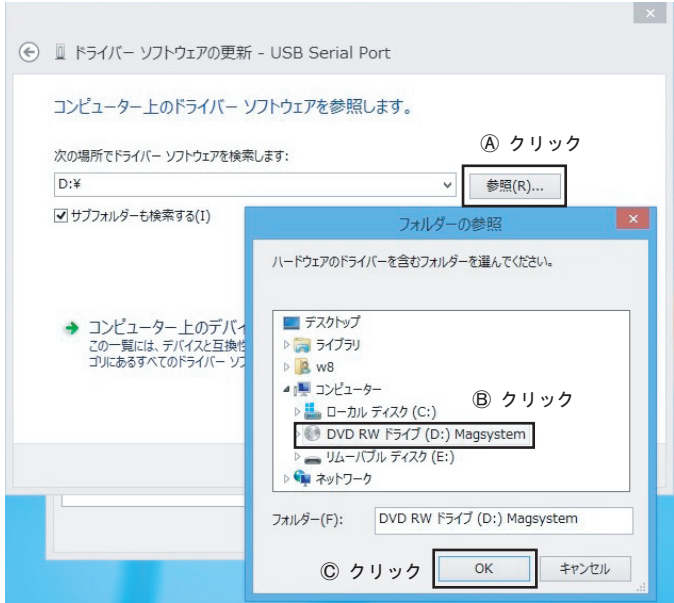

- ⑮ 次の画面で「**次へ**」をクリックします。



- ⑯ しばらくすると、「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」の画面が表示されますので、「閉じる」をクリックし、開いているその他の全ての画面を閉じてください。
- この時、マグウォッチャー等に特定の機器番号が与えられます。

以上で通信ドライバのインストールは、完了しました。

6. (B) マグウォッチャー等の使用準備

- ① 複数台のマグウォッチャー等を使用する場合、まだ接続していないマグウォッチャー等とパソコンを付属のUSBケーブルを使って接続し、5秒以上お待ちください。充電動作を行います。
- ⇒赤色ランプが点滅または、青色ランプが点灯します。
- ② マグウォッチャー等の電源スイッチを押し(2秒以下)、電源をONにします。
- ⇒青色ランプが点滅します。
- ③ タスクトレイに下記アイコンが表示され、しばらくして消えればインストールは完了します。



この時、マグウォッチャー等に特定の機器番号が与えられます。

- ④ マグウォッチャー等をパソコンから取り外します。
- ⑤ 全てのマグウォッチャー等に対し、上記 ①～⑤ の操作を行います。

7. (C) マグシステム本体のインストール

- ① デスクトップ画面のエクスプローラーをクリックします。




- ② インストーラを起動します。

■ CD-ROMの場合

「ライブラリ」の中の「コンピューター」をクリックして、表示されたメニューの中からCD-ROMが入っている光学ドライブをダブルクリックし、CD-ROMを開きます。


■ ダウンロード版の場合

ダウンロードして解凍した「mag****」フォルダを選択して開きます。

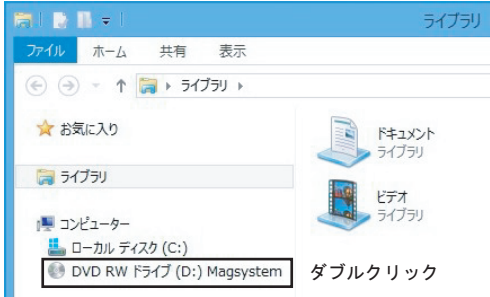


注記：本図はCD-ROMの場合

- ③ 「setup」を、ダブルクリックします。

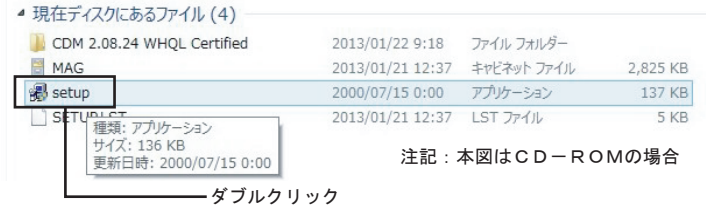


注記：本図はCD-ROMの場合

- ④ 「ユーザーアカウント制御」画面で、「はい」をクリックします。

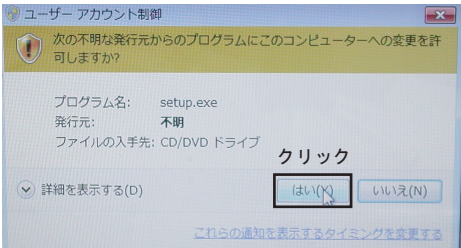


- ⑤ 「MagSystem セットアップ」画面が表示されますので、「OK」をクリックします。




- ⑥ 次の画面が表示されますので、 をクリックします。



- ⑦ 「プログラムグループの選択」画面が表示されますので、「継続」をクリックします。

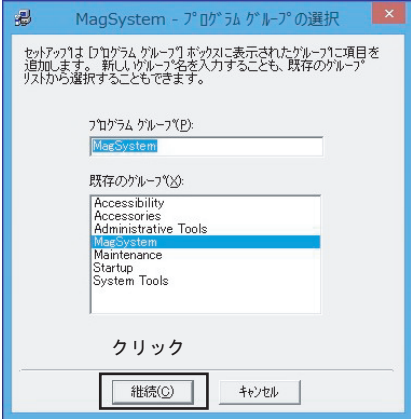

- ⑧ 次の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

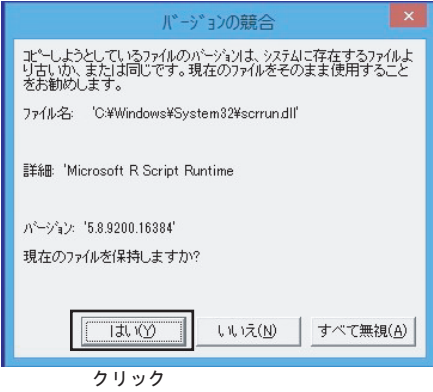

- ⑨ 「MagSystemのセットアップが完了しました」の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

- ⑩ パソコンの再起動を行ないます。

■ CD-ROMの場合

再起動前にCD-ROMを光学ドライブから抜きます。


以上でマグシステムのインストールは、完了しました。

8. マグシステムのアンインストール


- ① 「デスクトップ」画面にてカーソルを右下に移動し、その中から、「設定」をクリックします。
- その中から、「コントロールパネル」をクリックします。
- ② コントロールパネルの画面が表示されますので、「プログラムのアンインストール」をダブルクリックします。




- ③ 「プログラムのアンインストールまたは変更」が表示されますので、「Mag System」をダブルクリックします。

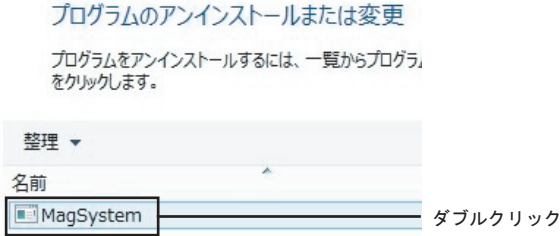

- ④ 次の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。

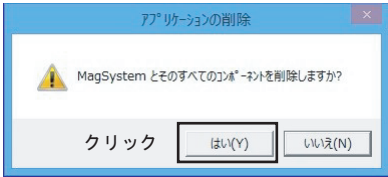

- ⑤ 次の画面が出た場合は、「すべて残す」をクリックします。

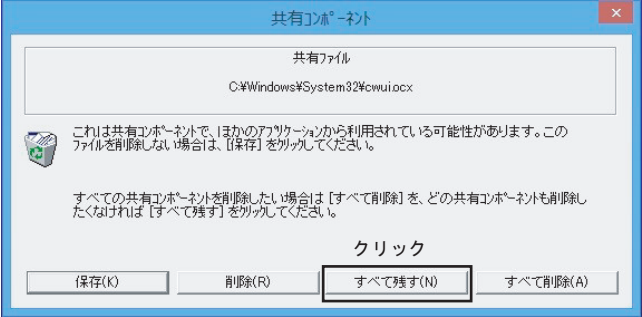

- ⑥ アプリケーションの削除画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

以上でマグシステムのアンインストールは、完了しました。

9. エラーなどが発生した場合

- ① 通信ドライバのインストール時にエラーが発生した場合
- ・マグウォッチャー等のUSBケーブルをパソコンから取り外し、最初の作業から操作し直してください。
 - ・不具合が解消されない場合、パソコンやUSBケーブルに不具合がないことを確認してください。
 - ・パソコンやUSBケーブルに不具合がないことを確認しても不具合が解消されない場合、マグウォッチャー等に問題がある可能性があります。修理を依頼してください。
- ② マグシステム本体のインストール時にエラーが発生した場合
- ・パソコンの光学ドライブやパソコン本体に不具合がないことを確認してください。
 - ・パソコン等に不具合がないことを確認しても不具合が解消されない場合、CD-ROMの裏面に傷などがないことを確認してください。傷などがあれば、お買い上げの販売元に交換を依頼してください。

Windows[®] Windows[®] 8 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている製品は各社の商標または登録商標です。

製造元 株式会社ディード <http://www.deed-jp.com/>
＜本社＞ 〒142-0052 東京都品川区東中延2丁目4番10号 中延ビル
TEL：03-3782-1181 FAX：03-3785-9990
＜那須事業所＞ 〒329-1571 栃木県矢板市片岡1197
TEL：0287-48-2120 FAX：0287-48-2126